

補修可能なシリコーン系弾性裏装材が誕生しました

Evatouch[®] Super Set EX

義歯床用長期弾性裏装材

エヴァタッチ[®]スーパーセット EX

Relining + Repair

補修可能

innovation

シリコーン系弾性裏装材の
あれも、これも！！



今までできなかったシリコーンの盛り足し、補修を可能にしました。

新開発のシリコーン修復材を採用。

辺縁部の剥がれといった小補修から、

顎堤の状態の変化に対応させるための追加裏装まで

自由度の高い治療を行うことができる次世代の長期弾性裏装材です。

NEW

補修

追加



NEO DENTAL CHEMICAL
PRODUCTS CO., LTD.

Evatouch[®] Super^{Set} EX

補修可能

エヴァタッチ[®] スーパー セット EX

シリコン系弾性裏装材の優れた特性を十分にご活用頂ける補修可能な裏装材です。

小修復から、顎堤の状態に対応させるための追加裏装まで、各種補修だけでなく、シリコン修復材の柔らかさを活かして、必要な部位のみスーパーソフト化することも可能となり、治療の選択肢が広がりました。



2.39MPa

裏装材接着性

エヴァタッチ[®] スーパー 裏装材

Evatouch[®] Super



Relining

裏装材と修復材の
コンビネーションにより
自由度の高い治療が行えます。

1.94MPa

修復材接着性

シリコン修復材

Silicone Repair



図中では修復材を緑色で図示していますが、実際は裏装材に近似したレジン床色です。

修復材の色

シリコン修復材の特長

シリコンを補修

シリコンの補修を初めて可能としたエヴァタッチスーパー専用の修復材です。

十分な耐久性

修復材の引裂強度は10.6kN/mと十分な耐久性があります。


スーパースoft

ゴム硬度値は裏装材の約半分、この特性を利用し必要な部位のみをスーパースoft化することも可能です。

(ゴム硬度 (ショアA))

40 20

裏装材 シリコン修復材

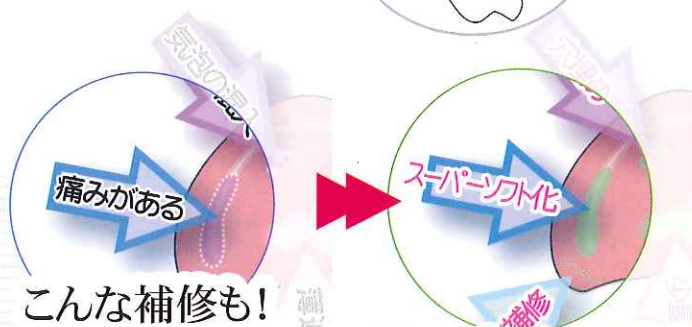

こんな補修も！
必要部位のみのスーパースoft化

シリコン修復材

エヴァタッチスーパー裏装材の特長

疎水性シリコン

吸水性のほとんど無い疎水性シリコンを採用した汚れに強い裏装材です。

優れた接着性

プライマーはレジン表面をシラン化することにより、強力な接着界面を提供します。

無味無臭無発熱

硬化時の味、臭い、発熱がありません。

生体親和性

人体に対し活性が極めて低いシリコン系です。

マスキング効果

適度な不透明性が硬化物内の微細な気泡を見えなくするマスキング効果があります。

適度な流動性

口腔内温度により流動性が程よく変化し、必要な裏装厚さの確保が可能です。


お手入れの仕方



- ① 毎食後義歯をはずし、水洗いをする。
- ② 裏装材部分はスポンジやガーゼを使って優しく洗う。
- ③ 義歯洗浄剤に浸ける。
- ④ お口のお手入れをする。
- ⑤ 装着前に水洗いする。

裏装法

Relining

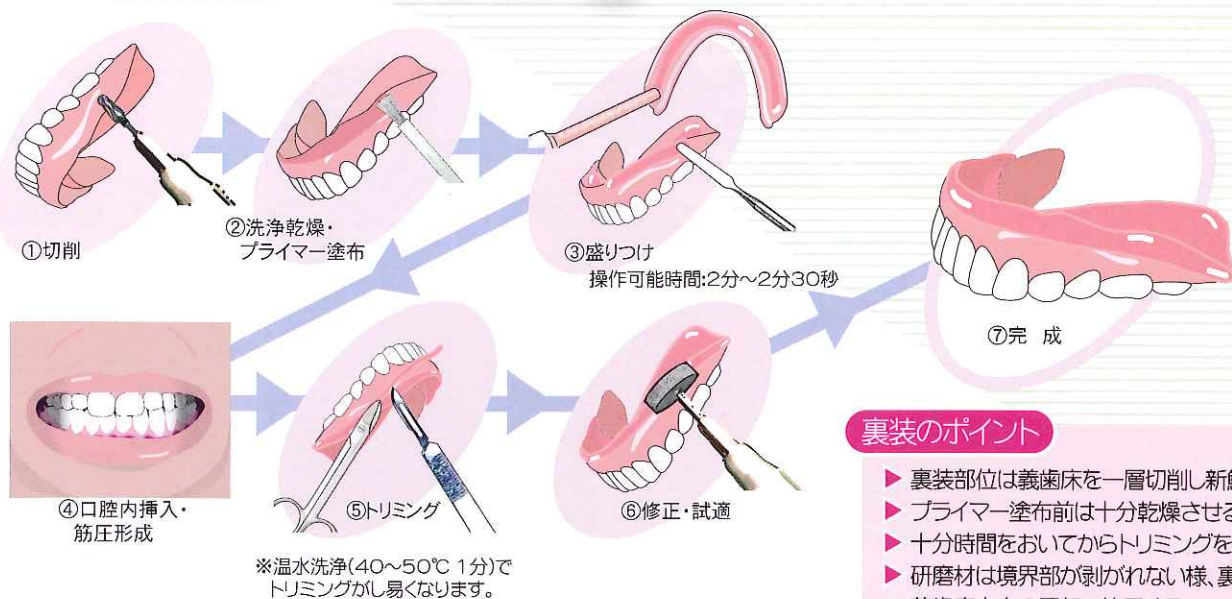


裏装のポイント

- ▶ 裏装部位は義歯床を一層切削し新鮮面を出す。
- ▶ プライマー塗布前は十分乾燥させる。
- ▶ 十分時間をおいてからトリミングを行う。
- ▶ 研磨材は境界部が剥かれない様、裏装材側から義歯床方向の回転で使用する。

補修法

Repair

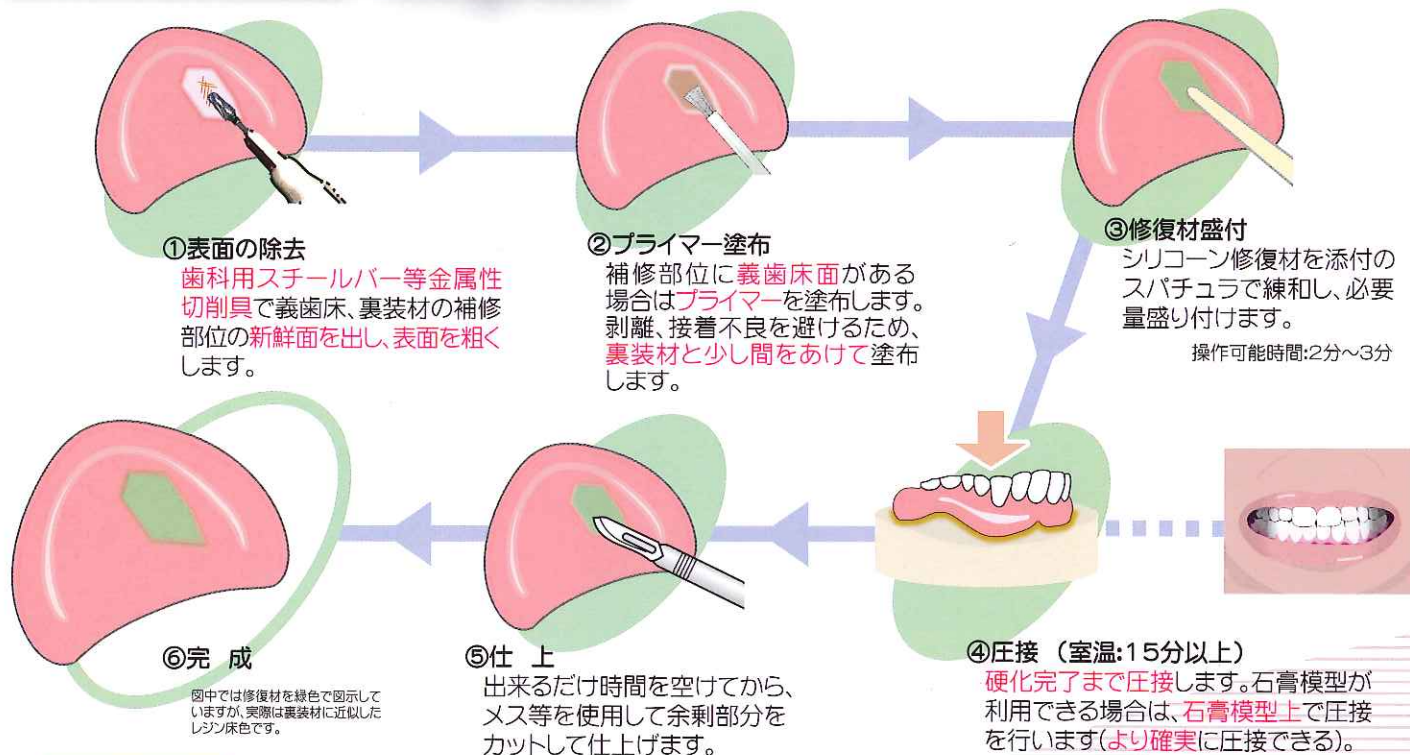


補修のポイント

- ▶ 補修部位の裏装材表面を粗く切削する。
- ▶ 補修部位は義歯床を一層切削し新鮮面を出す。
- ▶ プライマー塗布前は十分乾燥させる。
- ▶ 硬化完了まで圧接する。

注意 上記補修法は一例です。使用に際しては添付文書及び取扱説明書をよくお読みください。

Evatouch® Super Set EX

修復部位断面

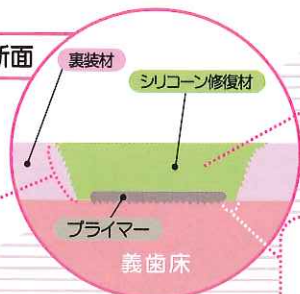

裏装材面は歯科用スチールバー等金属性切削具で新鮮面を出し、かつ面を粗くする。

修復材の硬化完了まで確実に圧接する。

プライマーは裏装材と接触しない様少しあけて義歯床面にのみ塗布する。



Evatouch[®] Super^{Set} EX エヴァタッチ[®] スーパー セット EX

義歯床用長期弾性裏装材



エヴァタッチ[®] スーパー セット EX

内 容

エヴァタッチ スーパー		
裏装材	50g	1本
プライマー	10mL	1本
シリコーン修復材	5g	1本
ネオ ミキシングチップ(S)		8本
エヴァポイント		1個
エヴァホイール		2個
プライマー塗布用筆		2本
スパチュラ		1本
練和紙		1冊
取扱説明書		

管理医療機器

一般の名称:

義歯床用長期弾性裏装材

医療機器認証番号:

219ADBZX00130000

標準価格 22,000円

別売単品



エヴァタッチ スーパー 裏装材
50g 1本
標準価格 9,500円
(医療機器認証番号:21500BZ00519000)



エヴァタッチ スーパー プライマー
10mL 1本
標準価格 5,000円
(医療機器認証番号:21500BZ00519000)



プライマー塗布用筆 2本
標準価格 400円



ネオ ミキシングチップ(S) 8本
標準価格 1,600円
(医療機器届出番号:13B1X00154000031)



ネオ ディスペンサー 1個
標準価格 13,000円
(医療機器届出番号:13B1X00154000030)



エヴァポイント 2個
標準価格 1,800円
(医療機器届出番号:13B1X00154000025)



エヴァホイール 2個
標準価格 1,200円
(医療機器届出番号:13B1X00154000026)



ネオ練和紙(S) 5冊
標準価格 500円

ご注意 使用に際しては添付文書及び取扱説明書をよくお読みください。

- ・接着させる面積が著しく小さくかつ遊離した部位を補修する場合は破損脱落の可能性があります。この場合当該部位のみで補修せず、ある程度の強度が確保可能な面積を削去して補修を行って下さい。
- ・確実な補修を行うために、補修部位の裏装面をスチールバー等で粗くし、レジン面は表面を一層削去して下さい。
- ・プライマーは水分の存在を嫌います。接着不良を避けるため、プライマー塗布前の乾燥は十分に行って下さい。
- ・また、プライマー塗布後の乾燥も十分行って下さい。
- ・シリコーン修復材が本来の貼り合わせ強度を発揮するには、ある程度修復材自体の厚みが必要になります。特に貼り合わせ時には薄くなりやすいので、レジン床を削去するなどして修復材分の厚みの確保に留意して下さい。また圧接時にも、修復材が薄くなり過ぎないように注意して下さい。

- ・補修を確実にするため、硬化完了まで圧接を行って下さい。
- ・接着強度は十分にありますが、補修個所の界面はそれ以外の場所に比べ強度的には若干弱くなります。患者様には無理な力を加えないよう注意喚起をして頂きますとともに、補修後は早めの経過観察を行い、同部位の状態をチェックして下さい。
- ・使用途中の義歯の場合、レジン床及び裏装材の状態により補修が困難なケースもあります。作業終了後は状態をよくご確認ください。
- ・修復材の色はエヴァタッチ スーパー裏装材に近似していますが、若干異なって見えます。補修部位の面積が広い場合や色調の統一感を重視する場合は、シリコーン修復材を単独ではなく裏装材と併用してお使い頂くことをお勧めします。
- ・裏装材及び修復材の詳細な使用方法を記載したリーフレットがございます。下記フリーダイヤルまでご請求下さい。

製造販売業者



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. (03) 3400-3768 (代) Fax. (03) 3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <http://www.neo-dental.com/>

販売店名

株式会社 松本 歯科 商会

代表取締役 松本 渡

仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号

TEL (293) 3588 (代表)

ERX1205R02.2