


構図 × 効率を考えた新設計口角鉤

Photo Guider.

フォトガイダー

「フォトガイダー」外形と垂直・水平ラインが
適正な規格写真に導きます！

- ▶ 装着基準の院内共有がカンタン！
- ▶ どんなカメラでも撮影角度にブレが生じにくい！
- ▶ 規格撮影は所見説明・経過説明に伝達力抜群！
- ▶ 大人にも子供にも使用可能！

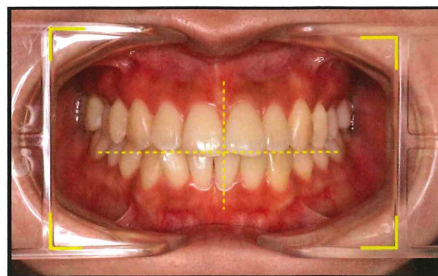

正中
(ファインダー横幅中央)

Photo
Guider. A

正面観撮影用
[二対で使用]

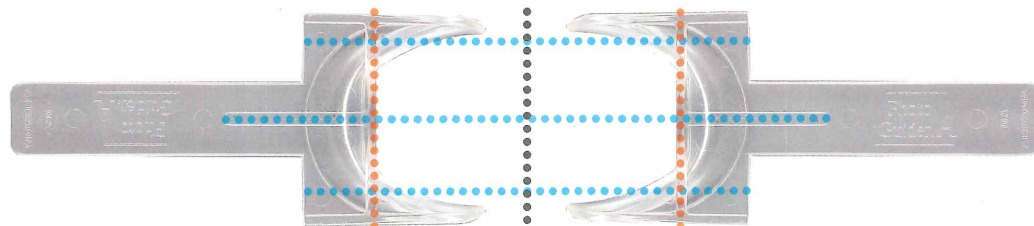


Photo
Guider. A

上顎犬歯

Photo
Guider. C

側方面観撮影用
[撮影しない側で使用]


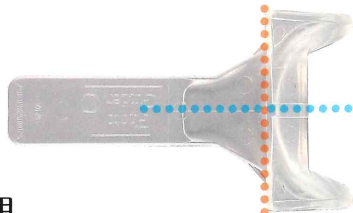


Photo
Guider. B

側方面観撮影用
[撮影側で使用]

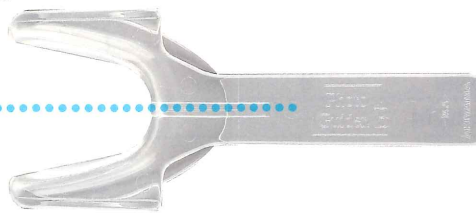


フォトガイダー使用で撮影する際のポイント
フォトガイダー外形で囲まれた四角の面と、撮影する際のファインダー(四角の面)を平行に位置させることが適正な撮影に繋がります。

正面観撮影のヒント [正面観撮影はA型を2個使用]
口角装着後の引き加減は、正中から左右の垂直ライン(オレンジ色点線)の距離が均等になるように引きます。

側方面撮影のヒント [側方面観撮影はB型、非撮影側はC型使用]
左右引き力の合計を「10」とすると、B型は「8」C型は「2」程度で軽く添えます。

水平ライン(水色点線)は、瞳孔線(又はフランクフルト平面)と平行関係を保ち、咬合面前方が写真縦幅中央に位置するように装着します。

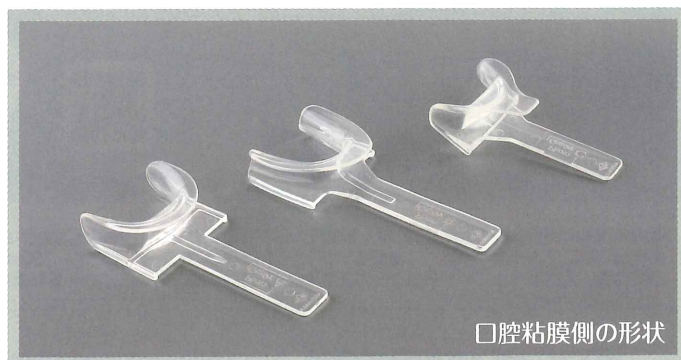


口腔粘膜側の形状

側方面観撮影
イメージ




正方面観撮影
イメージ

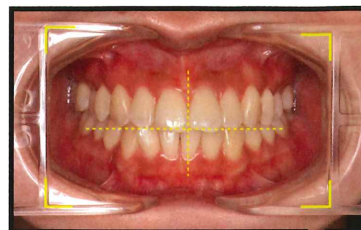

※実際の撮影ポジションは商品同封の使用説明書をご参照ください。

使用例〔成人〕

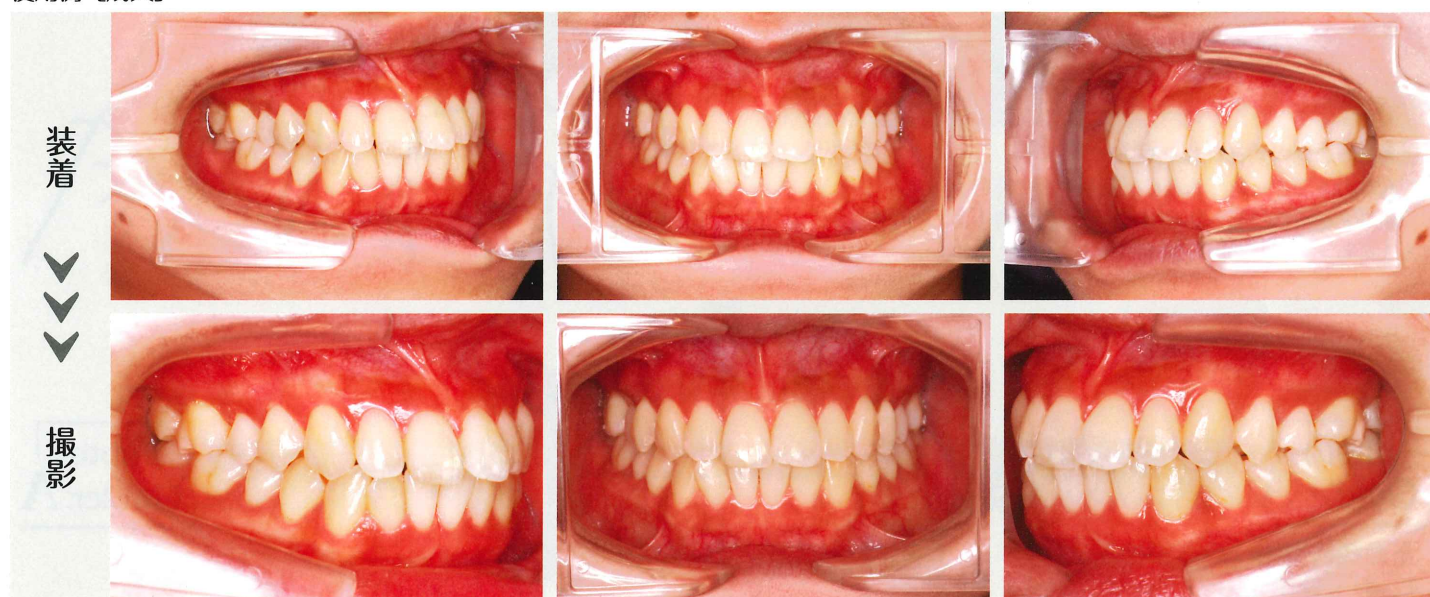

写真提供 清野 政孝 先生

商品詳細	フォトガイド A	フォトガイド B	フォトガイド C	価格
フォトガイドフルセット	2	1	1	¥8,640
フォトガイド正面観用	2	—	—	¥4,800
フォトガイド側方面観用	—	1	1	¥4,800


頬側面用：側方面観撮影に特化した口腔内撮影用ミラー
エバポーレイテッドミラー『カスタムSモデル』

¥15,000



製品詳細

1. 口腔粘膜に配慮した2つの形状を1つのミラーに付与
2. ミラー中央部のくぼみ（凹み部）は、ミラー保持に大変有効です。
構図維持がしやすく手際の良い撮影につながります。

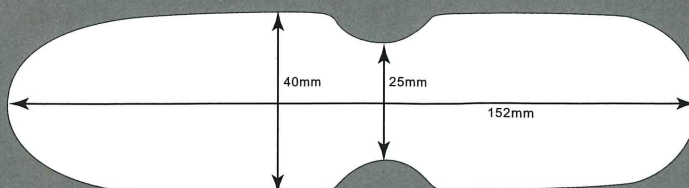

●掲載商品の価格は小売価格で、2021年6月1日現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ●販売名：フォトガイド 届出番号：13B3X00243000034 ●製造販売元：有限会社秋山歯科器具製作所 ●販売元：サンデンタル株式会社
●販売名：エバポーレイテッドミラー 届出番号：27B2X00041000004 ●製造販売元：サンデンタル株式会社

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ：月～金 9:00～17:00

大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタルホームページ
<http://www.sundental.jp>



@SunDentalJapan