



使用済み器具の再生処理フローのご案内

洗浄

十分な洗浄は消毒に近い効果が期待でき、感染リスクを低減させることができます。逆に不十分な洗浄は蛋白質の汚れが残留し、その中に多くの微生物が残存することとなり、その後の消毒・滅菌を不完全なものにする可能性があります。事前の洗浄により対象物から蛋白質の汚れを十分に除去することが重要です。

ウォッシャー ディスインフェクター



泡洗浄




キャンペーン対象商品
ウルトラ・クレンジイム

浸漬洗浄・超音波洗浄



※ミラーはダイレクトミラーのみ可

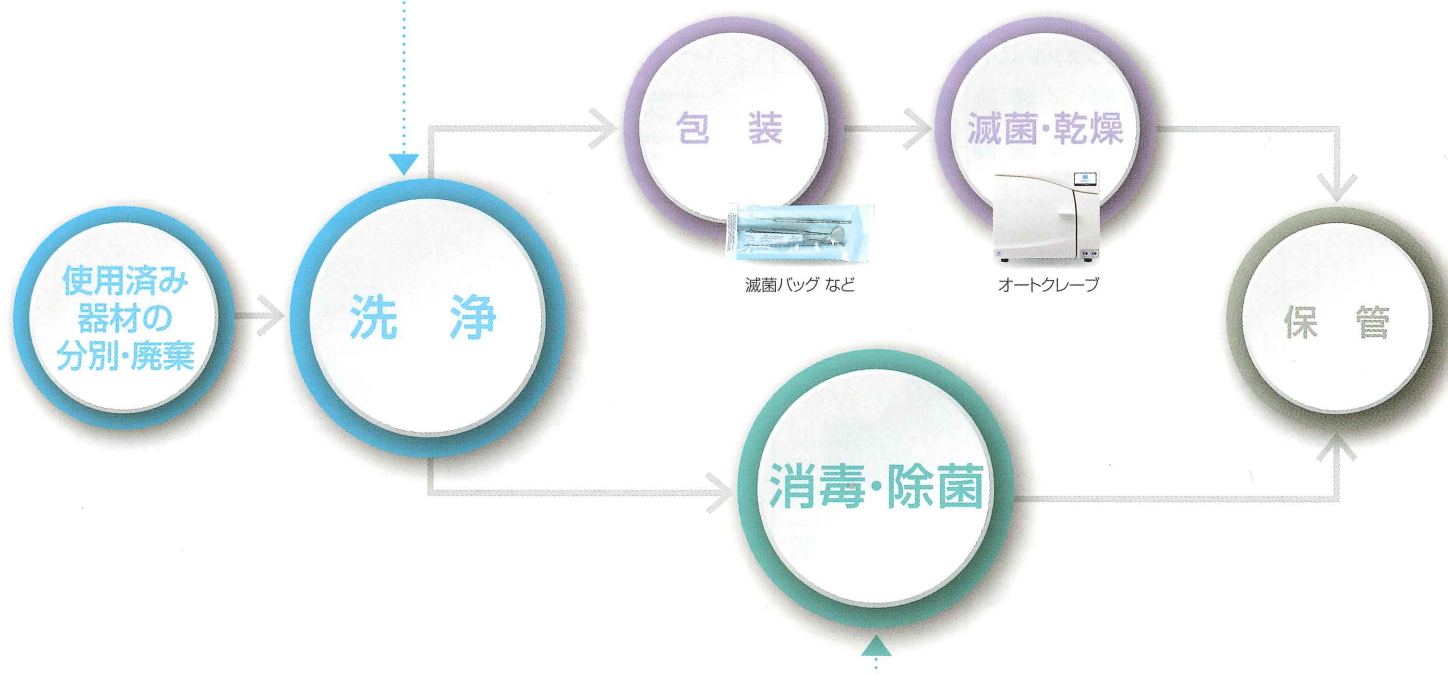

除菌消毒

消毒剤は「濃度」「時間」「温度」の3要素が消毒効果を左右するため、製品ごとの使用条件を遵守する必要があります。また消毒剤によって消毒効果が期待できる微生物などの特性をよく理解して、使い分けする必要があります。



※ミラーはダイレクトミラーのみ可



ギガセプトインスツルAF



デンタポン

環境洗浄

チェアなど診療環境の表面は基本的に清掃が基本とされていますが、血液等が付着している場合は消毒/除菌が必要です。その際、アルコール製剤が広く使用されていますが、B型肝炎ウイルスは不活化しないこと、血液に直接接触させると蛋白凝固を起こし、汚れとして固着する可能性があるため、注意が必要です。バキューム回路などは、だ液や血液を吸引するため洗浄が重要です。



マイクロジッドセンシティブワイプス



Toraysee for CE



マザックP

洗浄・除菌関連キャンペーン

期間 2021年12月21日～2022年2月18日 **数量限定**


平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「**洗浄・除菌関連キャンペーン**」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

感染予防をするうえで“**洗浄**”はとても重要な工程です。

不十分な洗浄では、適切な消毒・滅菌効果を得ることができません。



ウィズコロナ&アフターコロナ時代における
歯科医院での感染予防と管理
Webinarはこちら

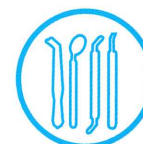

器具用

唾液や血液などのタンパク汚れの処理にはタンパク質分解酵素や界面活性剤を含有した薬剤を用います。アルカリ性洗剤は洗浄効果は高いですが、使用できない器具もあるので注意が必要です。

酵素系洗浄剤 ウルトラ・クレンジイム

株式会社菱化デンタル

器具・印象体・衣服など多用途に使えます。
泡・浸漬・超音波洗浄に対応。

■標準価格 150mL 5,800円 202600101

▶ **特別価格にてご提供!**

【器具の洗浄 手順例】



ウルトラ・クレンジイムによる器具の洗浄
左:泡洗浄(約3分)の場合
右:浸漬法(約10分)もしくは超音波洗浄法(約5分)の場合



50倍・500倍希釈 / 中性

作用時間 / 泡 約3分、浸漬 約10分、超音波 約5分

1本で実用液75L分(500倍希釈の場合)



水洗

乾燥


●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。 ●掲載商品の標準価格は2021年12月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 ●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区本ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)

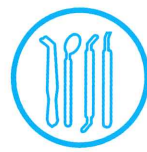

器具用

器具(小器具)用防錆/除菌/洗浄剤

ギガセプト インスツルAF

シュルケ&マイヤー

防錆剤配合のため、器具を傷めません。

■標準価格 2,000mL 9,600円 202600302

▶特別価格にてご提供!



33倍希釈/弱アルカリ性


作用時間/浸漬 約15分、超音波 約5分

1本で実用液66L分

【器具の洗浄 手順例】



ギガセプトインスツルAFによる器具の除菌
(浸漬法もしくは超音波洗浄法)

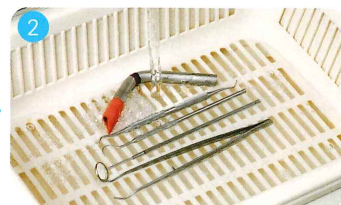

水洗

乾燥

薬液浸漬容器

ステリソーカー

ザーク

容器内側面に1～4Lまで目盛りが入っています。

■サイズ (外寸) W350×D215×H125mm
(内寸) W256×D175×H115mm

■標準価格 11,500円 206320061BL

▶特別価格にてご提供!



薬液交換日を
記録できるカレンダー付

4L

使用例



印象体

印象体には唾液や血液など汚染物が付着しています。
不十分な洗浄では石膏模型に汚染物が伝播してしまうと言われています。

印象体用除菌/洗浄剤

デンタボン

シュルケ&マイヤー

各種印象材に対応。5分以上の浸漬で
除菌できます。

■標準価格 900g 8,400円 202600301

▶特別価格にてご提供!



100倍希釈


作用時間/ 5～30分

1本で実用液90L分

【印象体の除菌 手順例】



デンタボンによる印象体の除菌
印象体を5～30分浸漬

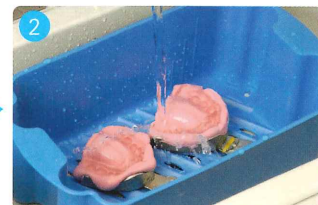

水洗

剥離型トレークリーナー

三菱トレークリーナー A

株式会社菱化デンタル

印象体をそのまま浸漬することで、らくにはがせます。
ペーストタイプのアルギン酸塩印象材も使用可能です。



■標準価格
トレークリーナーA スターターセット
(Advance-専用容器付き) 7,800円 202330222
トレークリーナーAdvance1000mL
7,800円 202330223

▶特別価格にてご提供!

6倍希釈 1本で実用液6L分

三菱トレークリーナー A
使用方法のご紹介はこちら



環境表面

治療後に触れやすい棚やユニットなど、環境表面の清拭によって感染を広げない対策が必要です。

チェア/環境表面用除菌クロス

ミクロジッド センシティブ ワイプス

シュルケ&マイヤー

アルコールフリーで、血液の拭き取りが可能です。

■標準価格 200枚 4,700円 202600300

▶特別価格にてご提供!




作用時間/約1分

【ベースンの清拭 手順例】



ミクロジッドセンシティブワイプスでの
清拭後、約1分間放置

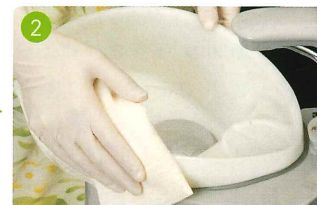

清潔な布による液剤の拭き取り
(デンタルタオルNを使用)

医療機器向け清拭クロス

Toraysee® for CE

東レ・メディカル株式会社

東レ独自の約2μmの超極細繊維で作られたクロスです。
消毒薬を併用して使用することが可能です。

■標準価格 10枚/箱(1枚ずつ個装) 3,600円 202600303
[非医療機器] [未滅菌]

▶特別価格にてご提供!



リユース可能



ユニット



ホース



マイクロスコープの清掃にも



バキューム回路

バキュームやタンクの配管などは汚染物や水が滞留します。日常的な洗浄で汚染や臭いを防ぐことができます。

バキューム回路洗浄剤

マザックP

株式会社ジェイエムエンジニアリング

過炭酸ナトリウム中の酸素で汚れを強力
除去。診療後のユニット内の洗浄に。

■標準価格
マザックP スターターズパック
2,220円 201070880


▶特別価格にてご提供!



10倍希釈

作用時間/約5分

1パックで33回分(チェア1台につき300mL使用)

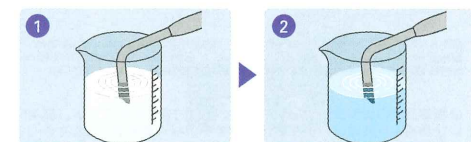

チェア1台につき、マザックP希釈液
300mLを吸引後、約5分間放置

水300mLを吸引