

CEREC[®]、e.max[®]ユーザーへ

調整

研磨

完結

チェアサイドでも素早くピカピカ

あらゆるセラミック系材料に


天然歯に馴染む自然な仕上がり



山本尚吾先生考案

SHOW SELECTION Z97




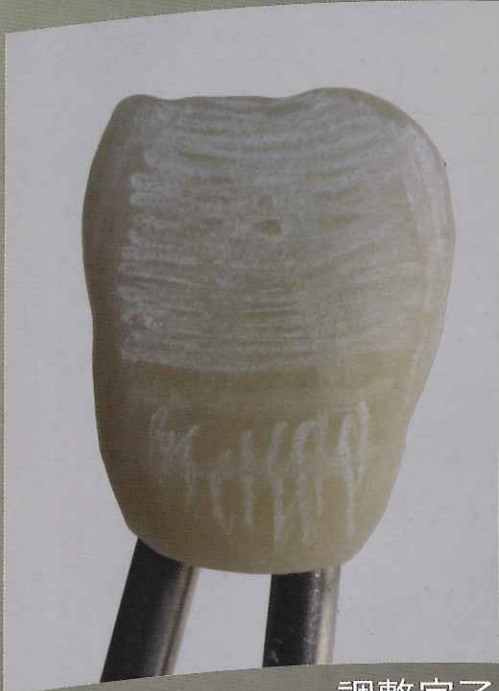

調整完了



表面全体荒研磨
1103, 1105

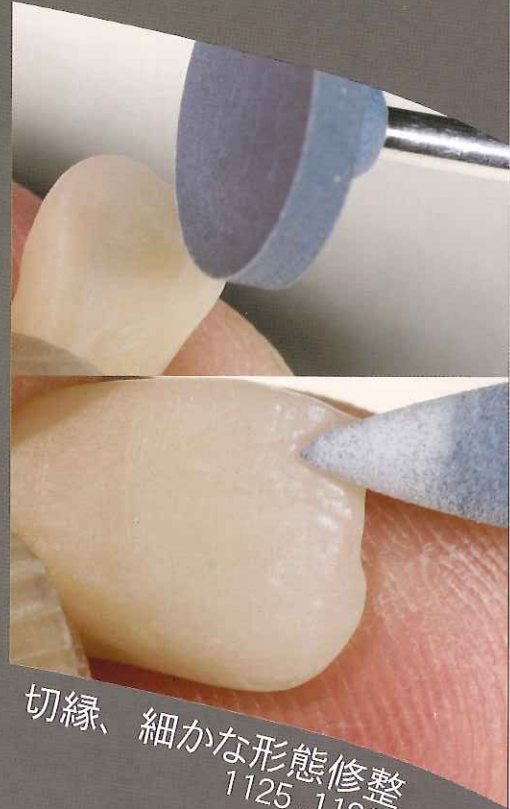

切縁、細かな形態修整
1125, 1123


HARIBO / POLIARPIO

完成




キット内容詳細は裏面をご覧ください。▶


生命感を与え 素早くピカピカに

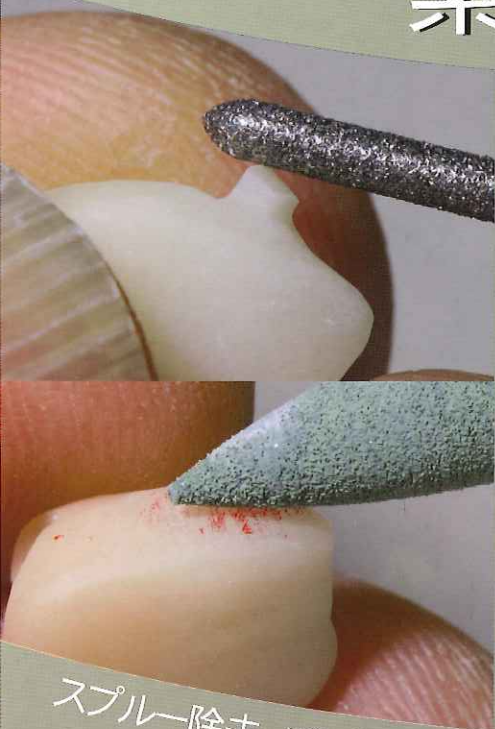

スプルー除去, コンタクト調整
H199 018, 1103, 1105

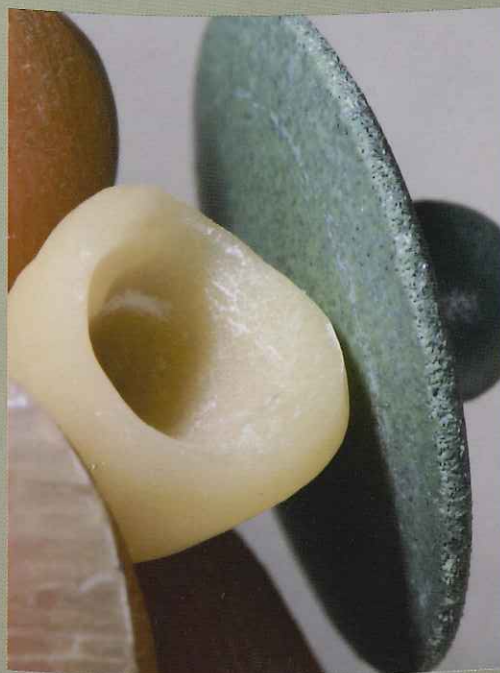


マージン調整
1104

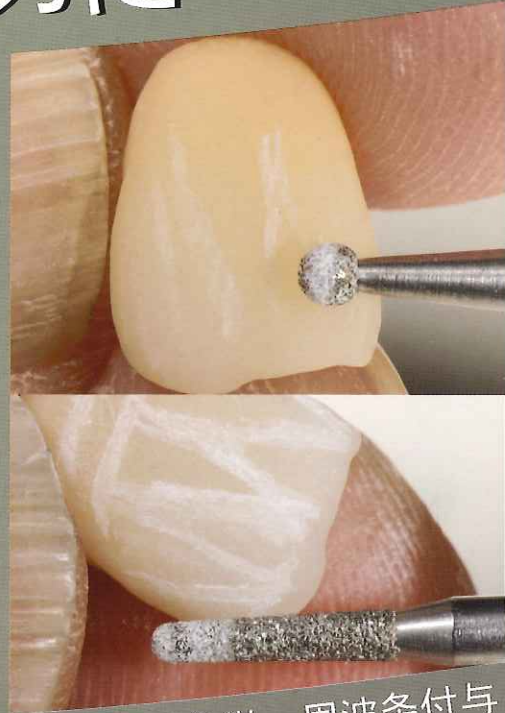


隆線、隅角徴、周波条付与
H001 021, H198 018, H001 010

ZIRCON-BRITE / DEDECO

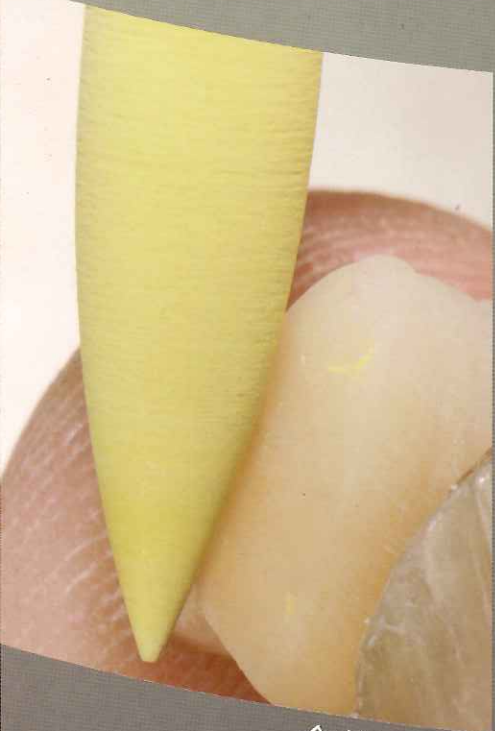

全体の研磨
1143

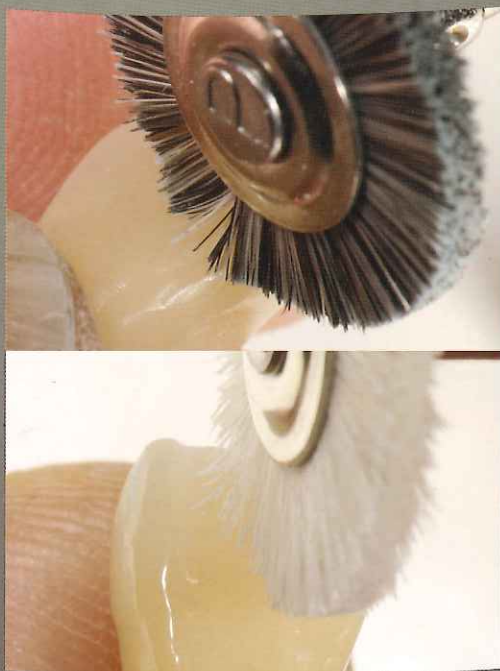

ジルコンブライト研磨、空研磨
113/17mm, 112/17mm



再度ジルコンブライト仕上研磨
#55, #58

キット内容

スプルー除去／隆線付与
ホリコダイヤモンドポイント HP

HORICO



H199 018



H198 018



H001 021



H001 010

荒研磨／コンタクト、マージン、形態調整／研磨
デデコセラダイヤモンドポリッシャー HP

DEDECO



1103



1105



1104



1125



1123



1143

艶出し／最終仕上げ
ロビンソンブラシ、フェルトポイント HP

POLIRAPID/ZIRCON-BRITE



113/17mm



112/17mm



#55



#58



ジルコンブライト 20g



バースタンド付き

SHOW SELECTION KIT

販売名：ショウ・セレクション・キット

一般的名称：歯科用研磨器材 届出番号：2881X00005000306

お取扱店

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)

『売るためでなく、
つくりだすため』

株式会社 茂久田商会 〒650-0047 神戸市中央区港島南町4丁目7番5号
(078)303-8241 www.mokuda.co.jp