

Virtual® Impressive Impressions

高精度シリコーン印象材 バーチャル

オータムキャンペーン
2014.10.1 水 ~ 12.25 木

さらに便利になった、 高精度印象材。

「バーチャル」は親水性と濡れ性が高く、唾液や血液が存在する口腔内でも細部まで精密に再現する、高精度のシリコーン印象材です。トレー材とウォッシュ材の接着が良好で、連合印象でも材料の境界にステップができません。自動練和器用の「バーチャル XL」も登場し、さらにスムーズに印象採得が行えるようになりました。

バーチャル レギュラー/ファースト

エキストラライトボディ
ライトボディ
モノフェーズ
ヘビーボディ

各 50mL×2本 ~~¥5,800~~ ▼

特別価格



自動練和器用も登場！

期間限定キャンペーン！



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Virtual® Impressive Impressions

高精度シリコーン印象材 バーチャル

バーチャルは、5種類の流動性と2種類の硬化時間(レギュラー、ファースト)であらゆる印象に対応します。

C&Bの印象に(連合印象2回法)

パテ+エキストラ ライトボディ
(パテはキャンペーン対象外です。)

インプラント上部構造・C&Bの印象に(連合印象1回法)

ヘビーボディ+ライトボディ

C&B・義歯・インプラント上部構造の印象に(単一印象)


モノフェーズ



エキストラ ライトボディ モノフェーズ ヘビーボディ
ライトボディ

良好な組み合わせ

バーチャルは、トレー材とウォッシュ材の接着が良好で、連合印象で材料の境界にステップができる心配がありません。

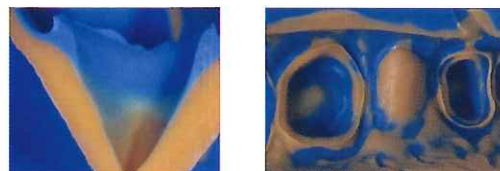

インプラント

Shore A硬度68のヘビーボディは、インプラントの位置関係を明確に印記します。さらに、細線再現性20μmで、親水性と濡れ性に優れたライトボディと併用することで、上部構造周囲粘膜を再現し、精度が高いインプラント上部構造が期待できます。

印象に重要な再現性

Shore A硬度67というヘビーボディのような硬度を持ちながら、20μmという細線再現性があるモノフェーズは、一般的なC&B症例から、義歯症例、インプラント上部構造まで広く適応します。

精密ながら流動性が低い特長を持つため、嘔吐反射が強い場合にもお使い頂けます。

NEW

自動練和器用新登場

新登場のバーチャル XLは、押し出すのに力が必要なトレー材の盛り付けが自動練和器で行えるので、スムーズに印象採得ができます。モノフェーズ(ファースト)とヘビーボディ(レギュラー/ファースト)をご用意しています。



バーチャル XL (キャンペーン対象外です。)

注文書 お申し込みはご利用の歯科商店様をお願いします。

バーチャル	レギュラー	注文数	ファースト	注文数
エキストラ ライトボディ 50mL×2 / ミキシングチップ 5×12	562827AN		562828AN	
ライトボディ 50mL×2 / ミキシングチップ 5×12	562829AN		562830AN	
モノフェーズ 50mL×2 / ミキシングチップ L×6	562831AN		562832AN	
ヘビーボディ 50mL×2 / ミキシングチップ L×6	562835AN		562836AN	

病院名:	
〒 ご住所:	
TEL:	
ディーラー:	担当:

一般的名称: 歯科用シリコーン印象材 / 販売名: バーチャル / 認証番号: 221AGBZX000249000 / 管理医療機器
一般的名称: 歯科用シリコーン印象材 / 販売名: バーチャル XL / 認証番号: 226AGBZX00049000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

CP1401L01

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation