



ホワイトニング用測色器

シェードアップ ナビⅡ

一式 ¥88,000


内容：本体 1、シェードアップ ナビ校正キャップ(ストラップ付) 1、
測色チップ 50、シェードメモ 50、動作確認用色板 1
※単三アルカリ乾電池は付属しておりませんので、別途ご購入をお願いいたします。

仕様

形 名	SSN-II
本体材質	ABS樹脂
電 源	単三アルカリ乾電池2本*
電 圧	3V
照 明 光 源	白色LED(最大出力0.2mW:ピーク波長470nm)
測 色 径	φ5.0mm
受 光 素 子	フォトダイオード
測 色 対 象	天然歯(上顎中切歯)
結 果 表 示	0.5~9.0(0.5間隔・18段階)
外形寸法	W148×D32×H42(mm)
質 量	本体75g(電池含まず)

別売付属品

製品名	製品番号	価格
シェードアップ ナビ 測色チップ(50個入)	947001	¥500
シェードアップ ナビ 校正キャップ	947002	¥2,500
シェードメモ(50枚入)	9707	¥1,000

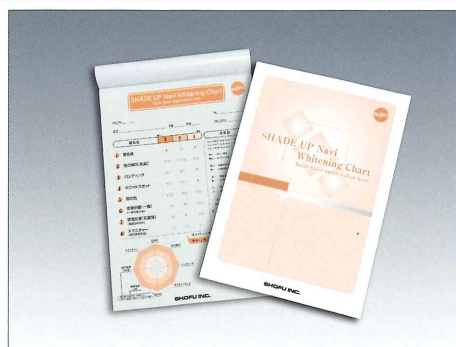

シェードアップ ナビ ホワイトニングチャート

一式 ¥1,200

内容：シェードアップ ナビ ホワイトニングチャート…1冊(30枚)
解説書…1冊

関連商品



歯科用漂白材
松風ハイライト
¥30,000



医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
松風ハイライトホームセット
¥6,800



歯科用デジタルカメラ
アイススペシャルC-IV
1台¥270,000

ご使用の際は取扱説明書等をよく読んでお使いください。

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
価格は2021年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店
株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (243) 3588(代表)



ホワイトニング用測色器
シェードアップ ナビⅡ

100
since 1922 SHOFU
2022
100年先にも輝く笑顔を
Bright smiles for another 100 years

ホワイトニングを希望される患者さまとの
コミュニケーションツールに

SHADE UP Navi II



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp

SHOFU INC.

製品紹介の動画はコチラ▶



患者さまとのコミュニケーションをスムーズにとるためにはどうすればいいの？

測色器を導入したいけれど、高額すぎて医院に導入できない・・・

ホワイトニング前後の変化を患者さまに上手く説明しにくい・・・

何か適切なホワイトニング用説明ツールはないかしら？



そんなみなさまのお声から「シェードアップ ナビ II」は誕生しました。

SHADE UP Navi II

シェードアップ ナビ IIは天然歯の色調を数値化するホワイトニング専用測色器です。

本来数値化しにくい天然歯の色を数値化することによって

ホワイトニングの効果を確認することができます。



シェードアップ ナビ
ホワイトニングチャート



Tooth color memo form

シェードアップ ナビ ホワイトニングチャート

SHADE UP Navi Whiting Chart

ホワイトニングの定着には検査、診断に基づく治療計画と治療、再評価、メインテナンスの体系を確立させることが必要不可欠です。そしてその際に個別の難易度を判定できることが大切になります。

検査、診断の段階でホワイトニングの難易度を予測するための8項目(着色度、色の傾向、バンディング、ホワイトスポット、顔の色、一歯における修復程度、処置部における修復程度、テクスチャー)を分析しレーダーチャート化することで、顔貌と口腔内の調和をトータルで考えたホワイトニングの総合評価を導き出します。また、分析結果は患者さまへの治療計画の説明ツールとしても活用いただけます。

検査の8項目をそれぞれ3段階に分類する。

歯の着色状態をキャラクタライズすることを目的にした検査項目。
これらはホワイトニングの結果を左右する主たる要素です。

目視にて判断される歯の色調の効果は、顔の色とも大きく関係する。

修復処置を行う前に必ずホワイトニングの必要性を確認する。

テクスチャーは、ホワイトニングの結果に大きく影響する。

各項目の評価結果を線で結んでホワイトニング処置の難易度を判断する。

SHADE UP Navi Whiting Chart Tooth color examination form				SHOFU	
File No. _____		Dr. _____		DH (ASS) _____	
患者 _____		年齢 _____		性別 _____	
難易度	高い 3	2	低い 1	基準値	
1 着色度	重	中	軽	シェードアップ No.8, No.9・・・重度着色 シェードアップ No.6, No.7・・・中度着色 シェードアップ No.4, No.5・・・軽度着色	
2 色の傾向(色調)	寒色	中間色	暖色	寒色・・・ブルー・緑色 暖色・・・赤、オレンジ系	
3 バンディング	強い	弱い	無	強い・・・治療回数と期間が長い 無・・・治療回数、期間ともに短め	
4 ホワイトスポット	多い	少ない	無	多い・・・修復処置と併用 無・・・ホワイトニングのみで対応	
5 顔の色	白色	赤色	黒色	白・・・歯、歯の色のコントラストが小さい 黒・・・歯、歯の色のコントラストが大きい	
6 修復処置(一歯) (一本の歯の中)	一部	無	全部	一部修復 無 全部に修復	
7 修復処置(処置部) (歯の表面の中)	一部	無	全部	一部修復 無 全部に修復	
8 テクスチャー (歯の表面性状)	ハイ	ミドル	ロー	表面性状 ハイ・・・表面性状、ザラザラ ロー・・・表面性状、ツルツル	
ホワイトニング難易度：合計 点				総合診断	
20 以上：高				11～19：中	
10 以下：低					

患者：初診 女性
患者の要望：できるだけ白くしたい。

総合診断：ホワイトニング難易度が中程度(シェード No.7)なので5ランクアップを目標にする。難易度は「中」だが「低」の方に近い。
着色度は「中」であるが、他の検査における評価が低いので、要望に近い結果を得ることができると考える。

ホワイトニング難易度：合計 13 点	
20 以上：高	
11～19：中	
10 以下：低	
総合診断	
Shade No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
Date	
ホワイトニング 1 回目	
ホワイトニング 2 回目	
ホワイトニング 3 回目	
ホワイトニング 4 回目	
ホワイトニング 5 回目	
ホワイトニング 6 回目	

For Beautiful Smile

SHADE UP Navi II

天然歯の色調を数値化するホワイトニング専用測色器

操作方法も簡単で、手になじみやすい小型・軽量タイプのため、手軽にお使いいただけます。
付属のシェードメモと共に活用いただくことで、目視による色調に対応した数値を具体的に示すことができるので、患者さまへの説明用ツールとしてもお使いいただけます。

かんたん操作



電源ONと1回の校正(キャリブレーション)で
すぐに測色ができます。



校正キャップをつけてキャリブレーション

衛生的に・・・


測色時に口腔内に触れる箇所を
ディスプレイにしました。

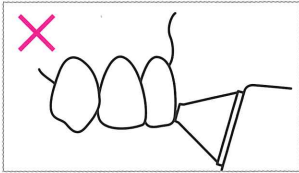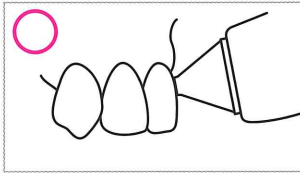

測色対象は天然歯の上顎中切歯の歯頸部です。
切端部を測色すると測定部からの投光が口蓋側に透過して
正しいデータが得られません。


患者さまにわかりやすい表示

シェードアップ ナビ IIは患者さまにホワイトニングの効果をわかりやすく説明できるように、歯の白さを0.5～9.0(0.5間隔)の18段階で表示します。また、ホワイトニングの測色結果が記録できる付属のシェードメモとともに活用いただくことで、変化を確認しながら患者さまへの説明ツールとしてお使いいただけます。

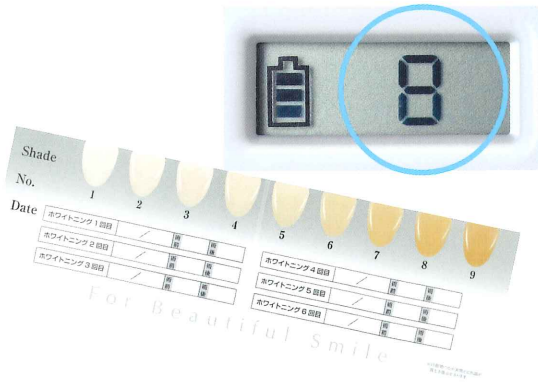


軽量・バランスのよさを追求
女性の手になじみやすい小型・軽量化を実現しました。

電源に乾電池を採用
電源に単三アルカリ乾電池(2本)を採用。
光源に白色LEDを採用した省電力設計です。
また、電池残量が液晶パネルに表示されるため
交換時期を確認しやすくなっています。

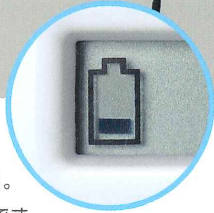

シェードメモの配列
シェードメモは目の感覚と一致した歯の色調を表現するために、明度と濃さを考慮した配列にしています。

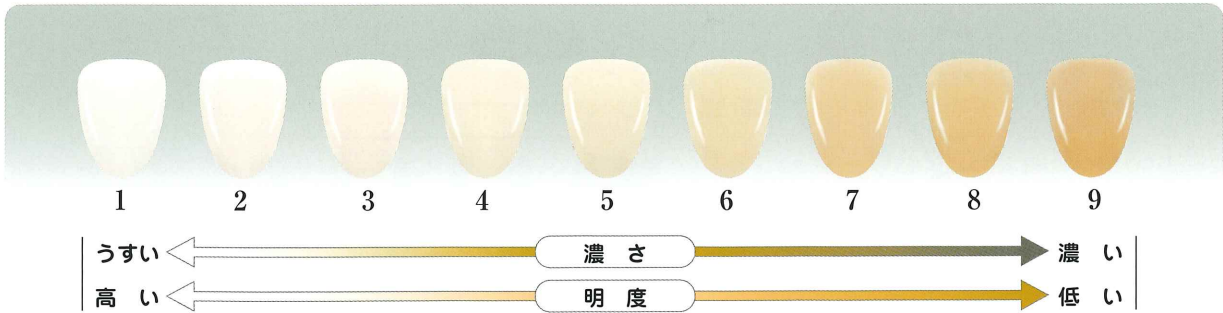

※印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。