

抜歯鉗子 Claw 残根用



【臨床動画】

抜歯鉗子Clawシリーズに残根用が新登場


- ・シャープな先端部と長いネックで隣在歯を避けて残根へアプローチできます。
 - ・内面ギザのエッジによるスパイク効果で滑りにくく、歯質が脆い残根も力をかけ過ぎずにつかむことができます。
- PAT.5858116



写真提供: 奈良 嘉峰 先生 (茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック院長)



4本の爪による 安定保持

鉗子の爪がつけねに残根の3～4ヶ所にかかることによって力学的バランスの良い支点となり、残根を安定して保持します。
そのため、残根の幅や湾曲の大きさを選ばずに幅広く適応します。

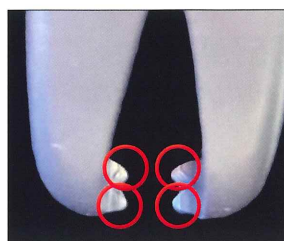

内面のギザによる スパイク効果

爪の3～4ヶ所の支点による保持機能に加え、内面ギザのエッジによるスパイク効果で、保持力をさらに強固にします。
そのため、力のかけ過ぎを防ぐことができ、脆弱な残根にも有効です。

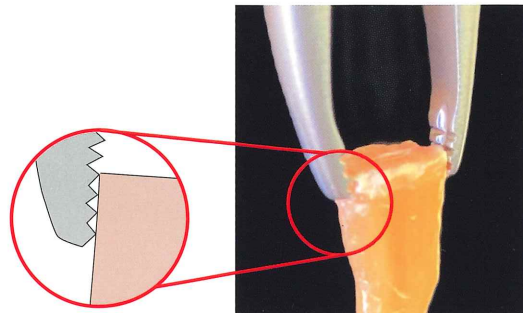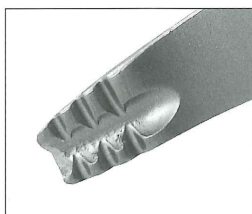

バネによる 微調節機能

バネにより先端部の可動範囲が安定するため、残根に適合させる際のコントロールが容易です。
従来のようにハンドル中央部に指を入れて調節しながら適合させる必要がなく、作業がスムーズに行えます。




スリムな軽量ボディー

残根の保持に強い力を必要としないため、スリムで軽量化を実現。把持操作での負担が軽減されます。

シャープな先端と長いネック

ネックが細く長いので、隣在歯を避けて残根にアプローチできます。

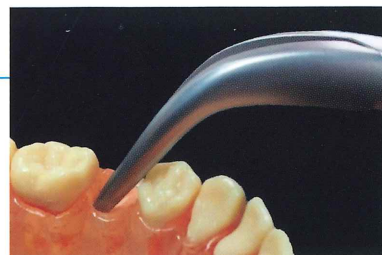

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2021年10月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元

株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売

株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>