




CAD/CAM用高透光性セミシンタージルコニアディスク
松風ディスク ZR ルーセント スープラ

100 since 1922 SHOFU 2022
 100年先にも輝く笑顔を
 Bright smiles for another 100 years


S-WAVE

26 mm
新登場

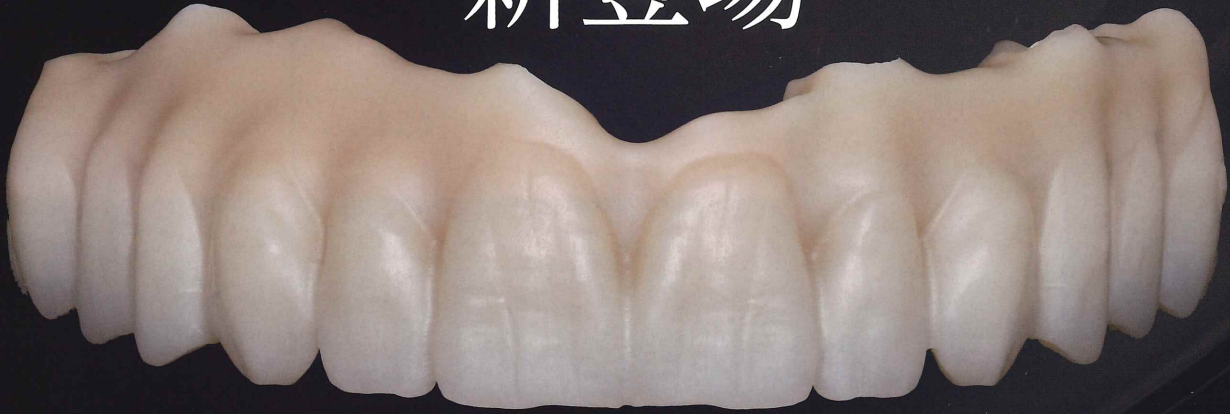


高さのあるロングスパンのインプラント症例に対応

従来サイズ

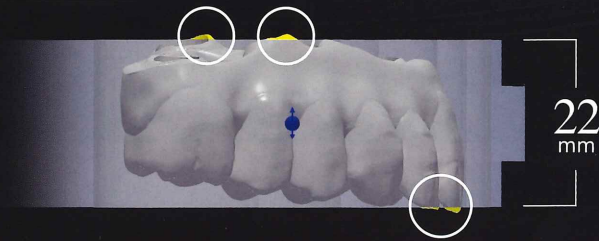

足りない

対応可能

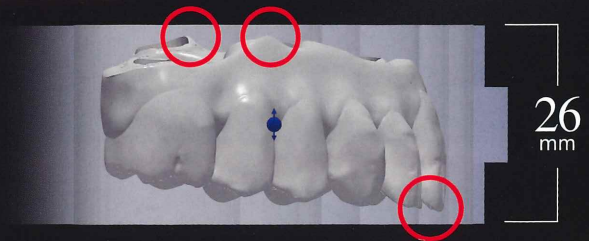

収まる

[すぐれた遮蔽性]

松風ディスク ZR ルーセント スープラのサービカル層は高い遮蔽性によりアバットメントのメタル色を遮蔽するためインプラント症例に適しています。



SHOFU DISK **ZR**
 Lucent
Supra



SHOFU INC.

トリプルグラデーション技術

「松風ディスク ZR ルーセント スーブラ」は、松風独自のトリプルグラデーション技術により、『強度』×『透光性』×『色調』を機能的にディスク内に配置しました。「ディスク1枚」でインレー、ラミネートベニアからロングスパンブリッジまで幅広い症例に対応可能です。

エナメル層


前歯部にも対応可能な高い透光性

ボディー層

層の界面が識別されにくい、すぐれたグラデーション機能

サービカル層


歯頸部の遮蔽性向上と、ロングスパンブリッジにも対応可能な高い強度

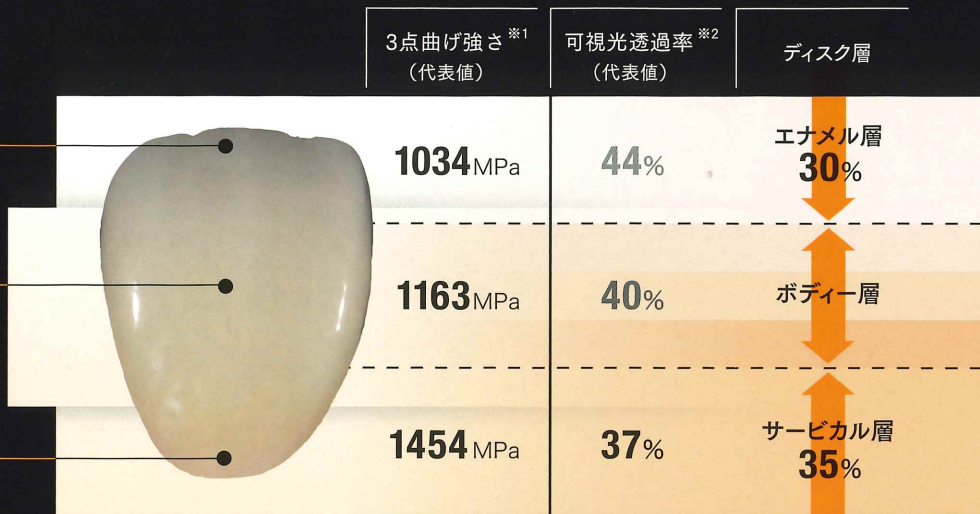

(※1) 3点曲げ強さ (ISO 6872:2015に準ずる)

(※2) 可視光透過率 (JIS R 3106:2019に準ずる、色調:A2、試験体厚さ:0.5mm)

『5層マルチレイヤリング構造』によるすぐれた色調再現性

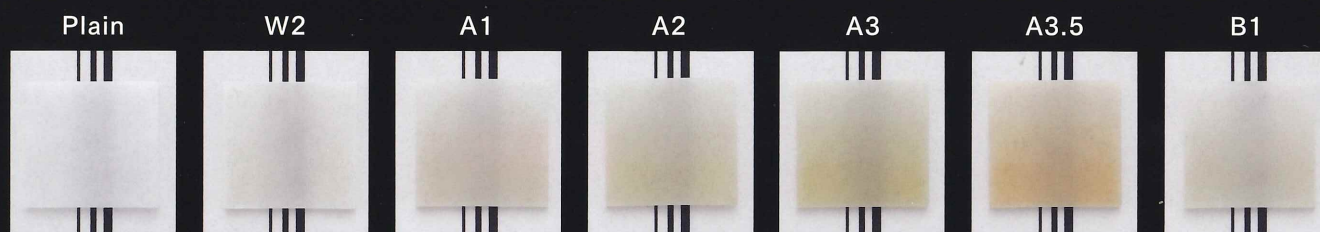

※ 印刷のため実際の色調とは異なる場合があります。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZRルーセント スーブラ	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A05

推奨焼結スケジュール

開始温度	室温
昇温速度	5℃/min (～10℃/min)
温度 / 係留時間	1450℃ / 120min
降温	炉内放冷又は5℃～10℃/min

※メタコネクターを使用する場合には、加工物を縦置きにして焼結してください。

包装・価格

松風ディスク ZR ルーセント スーブラ

14mm	¥39,000
18mm	¥44,000
22mm	¥48,000
26mm	¥55,000

【サイズ】

4種類：φ98×14、φ98×18、φ98×22、φ98×26 (mm)

【色調】

7色：Plain、W2、A1、A2、A3、A3.5、B1



ご使用の際は添付文書をよく読んでお使いください。

このカタログに記載の価格は2022年8月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

株式会社 松本歯科商会
代表取締役 松本 渡
仙台市若林区木ノ下二丁目1番20号
TEL (293) 3588 (代表)