



水酸化カルシウム水性ペースト

ジーシー カルフィー・ペースト

包装・希望医院価格●1面:シリンジ3g 1本、エンド用チップ 10本=¥9,980

水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
ジーシー カルフィー・ペースト
高度管理医療機器 21500BZZ00134000

別売



ジーシー エンド用チップ

包装・希望医院価格●1袋:10本=¥1,050

歯科用充填・修復材補助器具(歯科用注入器具)
ジーシー エンド用チップ
一般医療機器 13B1X10160000033

関連製品



水硬性仮材

ジーシー キャピトン ファスト

色質●3色=ホワイト、ピンク、アイボリー
包装・希望医院価格●1面:30g1個=¥1,060

歯科用仮材 ジーシー キャピトン ファスト
管理医療機器 303AKBZX00068000

製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
愛知県春日市鳥居松町2丁目285番地



A相NITIROータリーファイル

ジーシー NEX NiTi ファイル

セット包装・希望医院価格●アソートセットA 1面:6本入(※35/08※、※35/06、※35/04、※30/04、※25/04、※40/04 各1本)=¥6,080

アソートセットB 1面:6本入(※25/08※、※15/04、※25/04、※25/06、※35/04、※40/04 各1本)=¥6,080

21mmまたは25mm ※印は長さ19mmです。
単品包装・希望医院価格●1面:5本入(単一形態)=¥6,080

バリエーション10 1面:10本入(単一形態)=¥9,790

電動式歯科用ファイル ジーシー NEX NITIFファイル
管理医療機器 225AABZX00077000

製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
愛知県春日市鳥居松町2丁目285番地



B相NITIROータリーファイル

ジーシー NEX NiTi FILE Ms


セット包装・希望医院価格●アソートセットA 1面:6本入(※35/08※、※35/06、※35/04、※30/04、※25/04、※40/04 各1本)=¥10,820

アソートセットB 1面:6本入(※25/08※、※15/04、※25/04、※25/06、※35/04、※40/04 各1本)=¥10,820

21mmまたは25mm ※印は長さ19mmです。
単品包装・希望医院価格●1面:5本入(単一形態)=¥9,920

電動式歯科用ファイル ジーシー NEX NITIFファイル
管理医療機器 225AABZX00077000

製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
愛知県春日市鳥居松町2丁目285番地

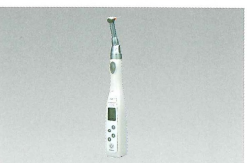

コードレス・エンド用モーター

NEX エンドモーター

包装・希望医院価格●一式:本体1個、コントラングルヘッド(MP-Y GC)1本、1/16減速シャック(F16R GC)1本、充電器1個、電源コード1本=¥128,000

歯科用電動式ハンドピース
エンドメイト TC2 (NEX エンドモーター)
管理医療機器 特定保守管理医療機器
222ALBZX00018000

製造販売元 株式会社ナカニシ
栃木県鹿沼市下日向700番地



ペーパーポイント<国際規格型>

ジーシー カラーコードペーパーポイント

形態●太さ5種=※20(黄)、※25(赤)、※30(青)、※45(白)、※60(青)

包装・希望医院価格●組合せ1面:200本(5形態各40本)=¥1,550

単一形態1面:200本=¥1,550

※掲載情報は2023年6月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー昭和薬品
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

iPhone & Android

App Store Google Play

どちらもこちらのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

ジーシー

公式アプリ



DA005M2305

カルフィー・ペースト

水酸化カルシウム水性ペースト

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

除去性に優れた 根管貼薬材



水酸化カルシウム濃度

36%

GC's Endodontic System

nex

NEW EXPECTATION

除去性と操作性にこだわって開発した 水酸化カルシウム水性ペースト


根管からスムーズに除去できる

医薬品メーカーとして
長年培った技術を応用した
APポリマー配合ペースト

APポリマーとは？

(Amphiphilic Polymer = 両親媒性高分子)

水になじみやすい親水基と、なじみにくい疎水基をあわせもった成分です。これにより、ペースト性状を保ちながら、除去時にはAPポリマーが水分を吸収することでペーストの水分量が増え、ペーストを除去しやすくなります。

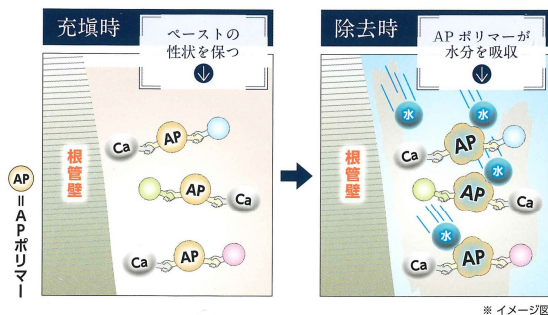


根管に挿入しやすい
カーブタイプの細いチップ

押し出しやすい
なめらかなペースト




先端外径：約 0.5mm (25G 相当)

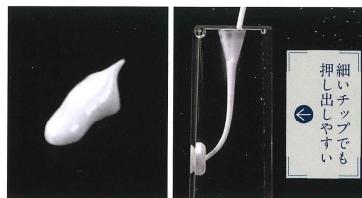


⚠ 根尖孔外への押し出し禁止




プランジャーは
軽い力でゆっくり押す

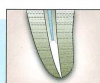

注入と同時に
チップを引き上げる

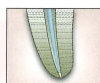

チップの先端を
根尖部に押し込む

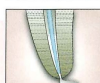

根尖孔外に向けてペーストを
強く押し出す

除去性

操作性

生体親和性


抗菌性

X線造影性

生体親和性

根尖歯周組織に対して
低刺激

カルフィー・ペースト填入後6週の組織像
(マッソントリクローム染色)

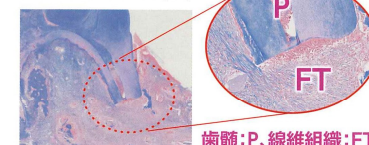


提供：北海道大学大学院歯学研究院 臨床教育部

ラットの根尖部付近に骨窩洞を形成後、カルフィー・ペーストを填入したところ、骨窩洞内の本材はほぼ全て吸収された。その後、自己組織による修復が進み、コラーゲン線維(青色に染色)の形成を認めた。


高い抗菌性

水酸化カルシウム濃度
36%

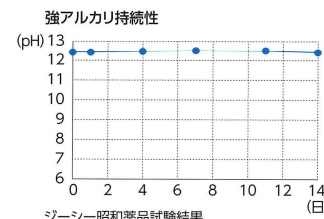

X線造影性

対アルミニウム
100%以上の造影性

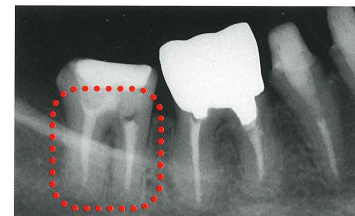


症例

既存クラウンの2次う蝕による再補綴治療。築造体周囲にもう蝕を認めたため、再根管治療を行った。




根管充填材を除去後、根管形成、化学的洗浄。

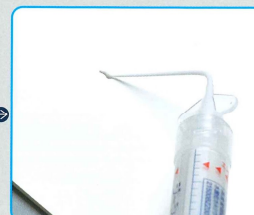

充填前に口腔外でチップ先端からペーストが出ることを確認。



根尖孔外への溢出に注意しながら、カルフィー・ペーストを充填。

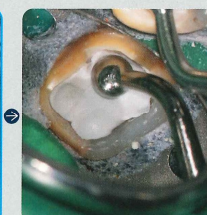

キャビトン・ファストで仮封。