

販売名・一般の名称


販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
松風 口腔内撮影キット	歯鏡	一般医療機器 医療機器届出番号 11B1X1000625D024
松風 口腔内撮影用ミラー	歯鏡	一般医療機器 医療機器届出番号 11B1X1000625D023
松風 口角鉤	歯科用開口器	一般医療機器 医療機器届出番号 11B1X1000650D207

5枚法キット



松風 口腔内撮影用キット 5枚法用...¥30,000
キット内容:口腔内撮影用ミラー 咬合面観用・口角鉤A(2入)・C(2入)・P

単品価格

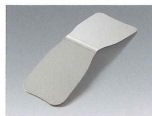

松風 口腔内撮影用ミラー
咬合面観用...¥20,000



松風 口腔内撮影用ミラー
頬側面観用...¥18,000



松風 口腔内撮影用ミラー
舌側面観用...¥15,000



松風 口角鉤 A (2入)
...¥3,800



松風 口角鉤 C (2入)
...¥3,800



松風 口角鉤 P
...¥6,500

【関連製品】アイスベシヤルC-V 1台 ¥298,000

一定の構図が得られるオートトリミング機能

撮影倍率を選択し、推奨距離におおよそ合わせれば撮影距離が多少前後しても同じサイズの写真を撮影することが可能です。



ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱い店

株式会社 松本歯科商会
宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3584

価格は2023年6月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。



口腔内撮影用ミラー/口角鉤

松風 口腔内撮影用ミラー/松風 口角鉤

ガイドライン付きで


簡単! 正確に! 撮影が可能



II 口角鉤・ミラーにガイドラインを付与

- 液晶画面のグリッドラインと正中・平行性を確認可能
- 構図のズレを防止 ●簡単、正確・スピーディに撮影


ガイドラインの付与により咬合平面とグリッドラインが一直線上に！

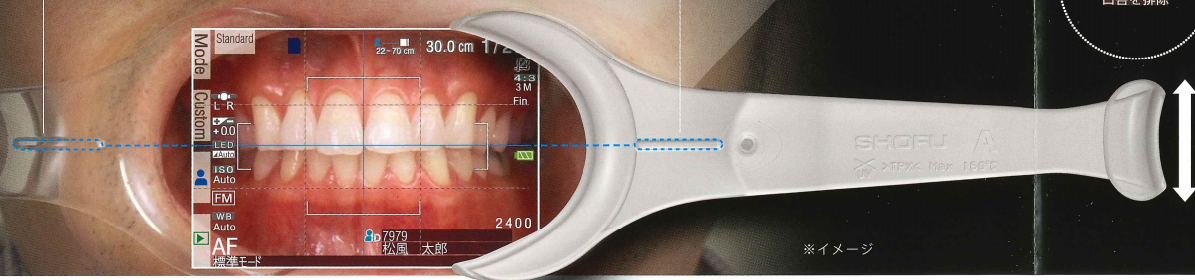


※イメージ

幅広でしっかりと
口唇を排除

患者さまでも持ちやすく
引っ張りやすいハンドル形状

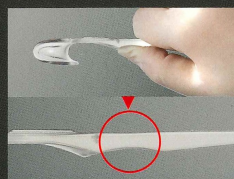

口角鉤A・Cの対側は
口唇排除のフックとして
使用可能

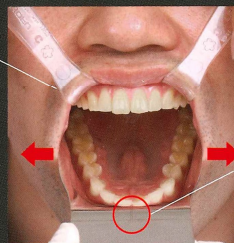


1枚で幅広い患者さまに対応

全歯列を写し込みやすいLサイズと、
標準のMサイズで幅広い口腔サイズに対応


幅広いウエストに
することで
口唇を排除しやすい

平行・センターを
保つための
ガイドライン

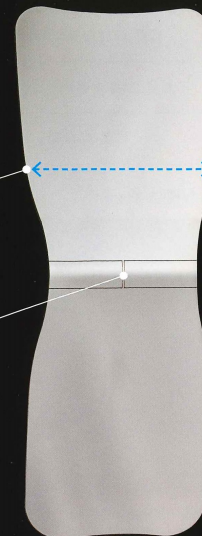


口角鉤

口角鉤 A

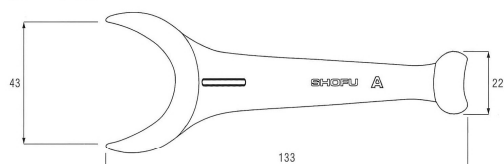


口角鉤A使用例

口角鉤 C

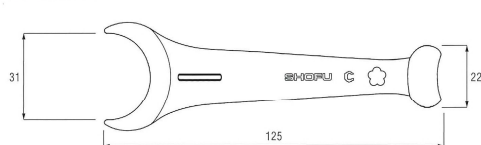

口角鉤C使用例

口角鉤 P

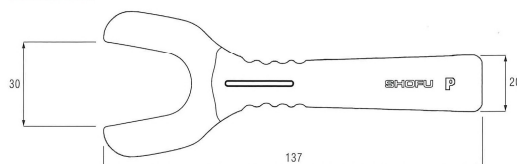

口角鉤P使用例

深めのアーチ
口唇部分を深めのアーチに設計することで
臼歯部までしっかりと撮影できます。

正面撮影ポイント動画




斜方撮影ポイント動画



口腔内撮影用ミラー


ロジウムコーティング | ミラー面・片面

咬合面観用

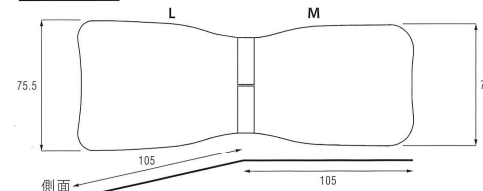


咬合面観用使用例(Lサイズ)

頬側面観用

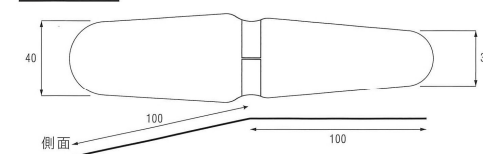

頬側面観用使用例

舌側面観用

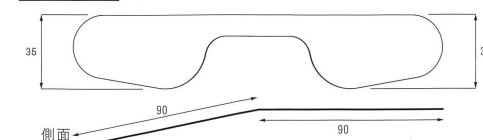

舌側面観用使用例

咬合面観撮影ポイント動画

