

セメントの選択基準って?



オートミックスタイプのレジンセメント (SAルーティング®Multi) を使用している先生約100名に聞きました! 出典: OralStudio会員Dr.へのアンケート結果



Q1 オートミックスを使用している理由は? (複数回答可)

1位 練和不要 (81.7%)


2位 安定した物性 (40.0%)

3位 操作時間短縮 (35.0%)

オートミックスによる術者エラーを減らす事と前処理の簡便さ
 操作時間が短いと、気泡が入らないから
 アシスタントに練和してもらって手間が不要
 アシスタントへ練和の教育が不要になった
 プライマー不要で、メタルにもCAD/CAM冠にも使えるから
 など率直な意見をいただきました。

操作性や物性を重視した方が総合的に考えてメリットがあるという考えが多く見受けられます

Q2 使用しているのは、保険治療? 自費治療?

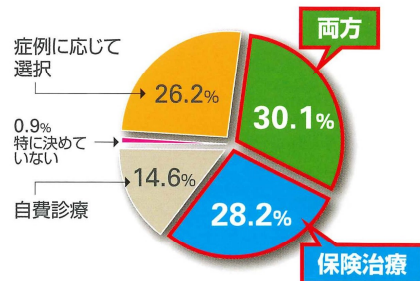

オートミックスタイプは経済的な負担が大きいイメージですが、約6割の先生が保険治療で使用をしています!

保険治療で使用するレジンセメントの選択基準が、「コスト面」だけでなく「操作性や物性」も重視されている結果となった。

SAルーティング®Multiオートミックスのポイントは3つ!

操作時間短縮

練和不要

確実な接着

新たな選択基準で検討してみませんか?




SAルーティング®Multi オートミックス



操作時間短縮

練和不要

SAルーティング®Multiオートミックスのミキシングチップには螺旋のハネが内蔵され、押し出すだけでAペーストとBペーストを手練り256回相当分ミキシングします。

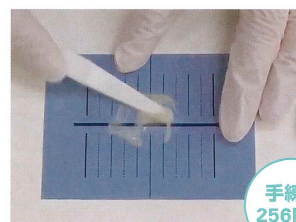

手練り256回分

2枚のハネが螺旋状に8個!
2°=256

さらに

スムーズな押し出し
自動練和によるスピーディーな操作性

選ぶ2種類のチップ



確実な接着


プライマー不要! シラン処理ができるレジンセメント

シラン含有

長鎖シランカップリング剤「LCSi」
CAD/CAMレジン用・歯科用陶材・シリカ系セラミックス(ジルコニア/酸化ジルコニウム)へ高い接着性を発揮する

接着性モノマー含有

リン酸エステル系モノマー「MDP」
歯質・金属・ジルコニアなどに高い接着性を発揮する

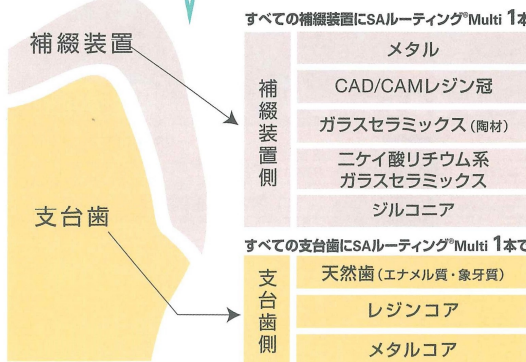

人歯せん断接着強さ (クリアフィル®ユニバーサルボンドQuickERとの併用)



測定条件: #1000球磨、研磨時間: 63mm マージン部へ500rpmで230秒から各10秒を繰り返す クロスヘッドスピード1mm/min、オートグラフAG-100KN (総研製作所) を使用 5℃水中貯留後、白線測定



SAルーティング® Multi オートミックス ご愛顧感謝キャンペーン

[実施期間] 2023.7.21>>>8.18 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「SAルーティング® Multi オートミックス ご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

SAルーティング® Multi オートミックス

バリューキット1箱を

- 内 容 Aベスト / Bベスト 0.2g (4.6mL) × 3本
- 付属品 ミキシングチップ(含筒用) × 40個
ミキシングチップ(エンド用) × 10個
ガイドチップ(エンド用極細) × 10個
- 標準価格 27,510円 202440210

ユニバーサル



特別価格にてご提供!!

無料オンライン配信 WHITE CROSS Live さあシンプルに応用しよう! 「CAD/CAMテクニック講座」

開催日時 **2023年7月21日(金) 20:00~21:30**

※ご視聴には、WHITE CROSSへの登録が必要です。
※当Webセミナーの受講は、お申込みいただいたご本人限定とします。
※当Webセミナーの録画、録音など、一切の記録や複製によるアップロードなどの配信を禁止します。



佐藤 洋平 先生



お申込みはこちらから

モリタ友の会セミナー 審美と補綴修復の基礎とトレンド ～審美補綴をスタートするためにアップデートするために～

開催日時 **2023年10月29日(日) 10:00~17:00**
開催会場 **ブリーゼプラザ 小ホール**
〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー7-8階 TEL 06-6344-4888
お申込みはこちらから



六人部 慶彦 先生 脇 智典 先生 岩田 淳 先生



友だち追加はこちらから

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売株式会社 MORITA

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com


株式会社 松本歯科商会

宮城県仙台市若林区木ノ下2-1-20
TEL 022-293-3588/FAX 022-293-3594

CAD/CAMレジン冠接着におけるおすすめラインナップ

CAD/CAMレジン冠接着ステップ

補綴装置への処理

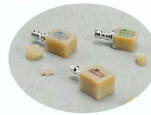

試適

色調確認



クリーニング & エッチング

1~2気圧 アドブレップ

or


クリーニング



カタナ® クリーナー

ごすり塗り 水洗 乾燥

使用されるセメントによっては別途シラン処理材が必要ですが

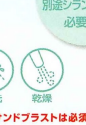

レジンセメント

デュアルキュア SAルーティング® Multi オートミックス

※カタナクリーナー使用時はラボサイドでのサンドブラストは必須



CAD/CAM冠の前処理 2つのポイント

- ① 適正圧(1~2気圧)でのサンドブラスト処理とシラン処理が重要
- ② SAルーティング® Multiを使えばシラン処理材が含有されている為プライマー処理は不要



ラボサイドには

ペンシルプラスター ジェットブラスト 100S

補綴物完成後の内面サンドブラスト処理にワイドな室内で作業効率を向上させ、技工作業の環境及びメンテナンス性を重視したユーザーフレンドリー設計!

標準価格 215,000円 2022303040



製品の紹介ページもぜひご覧ください。



チェアサイドには

歯科用研削器材 アドブレップ

補綴物の口腔内での試適後、チェアサイドにおいて適切なエア圧で補綴物内面のサンドブラスト処理が可能! ・圧力調整器が内蔵されており、補綴物の材質に適したプラスト圧に調整できます。 ・ユニットのエアジョイントに接続し、チェアサイドで使用可能です。

標準価格 76,000円 201030060



口腔内には

カタナ® クリーナー

支台歯・補綴物にオールマイティに使える 血液や唾液、仮封材・仮封材の残留物による汚染を清掃し 併用する接着材料の接着性を向上

単品 4mL 標準価格 4,490円 202430970



接着前の清掃に

CAD/CAMブロック AVENCIAシリーズ

カタナ®アベンシア®ブロック2

小白歯対応 CAD/CAM冠ブロック
標準価格 121,15000円/箱 14L:16,50000円/箱



カタナ®アベンシア®Pブロック

大白歯対応 CAD/CAM冠ブロック
標準価格 12,24,20000円/箱 14L:24,20000円/箱




カタナ®アベンシア®N NEW

前歯対応 CAD/CAM冠ブロック
標準価格 14L:26,15000円/箱



シームレスなマルチレイヤー

エナメル色、ボディ色を有し、間に中間色を含む積層構造のブロックです。独自の製造方法で、エナメル色からボディ色にかけて、彩度と透明度が境目なく移行的に変化するマルチレイヤーを実現しました。

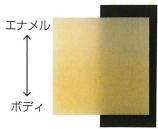

エナメル

ボディ

製品の紹介ページもぜひご覧ください。



販売名 カタナアベンシア®アドブロック 一般名 歯科用切削加工用レジン材料 医療機器認証番号 229AF82X00091000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスI)
販売名 カタナアベンシア®Pブロック 一般名 歯科用切削加工用レジン材料 医療機器認証番号 302AF82X00010000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスI)
販売名 カタナアベンシア®N 一般名 歯科用切削加工用レジン材料 医療機器認証番号 301AF82X00015000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスI)
販売名 クラレノリタケデンタルデュアルキュア®デュアルキュア® 一般名 歯科用接着剤(歯科用セラミック系接着剤) 歯科用接着剤(歯科用セラミック系接着剤)
販売名 SAルーティング® Multi オートミックス 一般名 歯科用接着剤(歯科用セラミック系接着剤) 歯科用接着剤(歯科用セラミック系接着剤)
販売名 ジェットブラスト 100S 一般名 歯科用研削器材 医療機器認証番号 2582X1003000010 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI) 製造販売 株式会社モリタ
販売名 アドブレップ 一般名 歯科用研削器材 医療機器認証番号 1182X0007100000 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI) 製造販売 株式会社モリタ
販売名 カタナ® クリーナー 一般名 歯科用洗浄剤(歯科用金属用洗浄剤) 医療機器認証番号 301AF82X00015000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスI)
●営業場所は、2023年7月21日現在のものです。標準価格には消費税は含まれておりません。●仕入れおよび外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
製造販売 株式会社モリタ 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380.2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834.6161
販売 株式会社モリタ 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380.2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834.6161 お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222.8020 (フリーコール) www.dental-plaza.com