

審美修復 接着ステップ紹介


【ジルコニア接着】

補綴装置への処理



【支台歯への接着】

歯質への処理

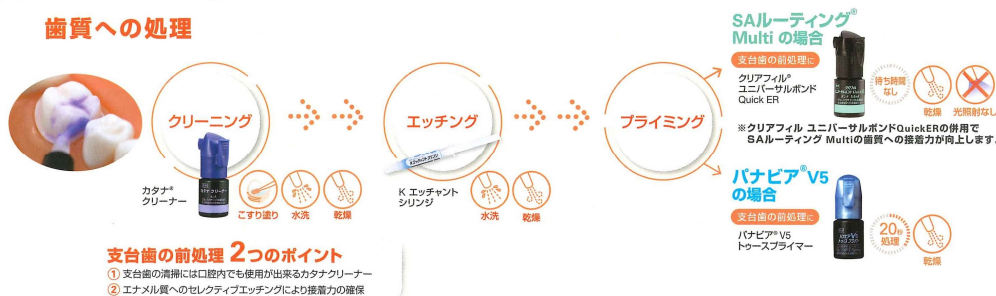

関連商品の紹介

【ラミネートベニア接着】 パナビア®ベニア LC



「パナビア®ベニア LC」の接着ステップ



販売名 パナビア®V5 ベースト 一般販売名 歯科用ユニバーサルレジンセメント 医療機器認証番号 303ABZ000035000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレニタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ
販売名 パナビア®V5 トゥースプライマー 一般販売名 歯科用ユニバーサル接着材料(歯科金属用接着材料) 医療機器認証番号 226ABZ000040000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレニタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ
販売名 クリアフィル®セラミックプライマー プラス 一般販売名 歯科用ユニバーサル接着材料(歯科金属用接着材料) 医療機器認証番号 226ABZ000040000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレニタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ
販売名 K エッチャント シリンジ 一般販売名 歯科用エッチング材料 医療機器認証番号 226ABZ000035000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレニタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ
販売名 デュアルキュア型 パナビア®V5 一般販売名 歯科用光重合型接着材料(歯科用ユニバーサル接着材料) 医療機器認証番号 226ABZ000035000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレニタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ
販売名 パナビア®ベニア LC 一般販売名 歯科用光重合型接着材料(歯科用ユニバーサル接着材料) 医療機器認証番号 226ABZ000035000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレニタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ

パナビア®V5 カタナ®クリーナー 高接着キャンペーン

【実施期間】
2023.10.23>>>11.20
数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「パナビア®V5 カタナ®クリーナー 高接着キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を 特別価格 にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

パナビア® V5 スターターキット

■標準価格 24,150円 202430601

＜商品構成＞
パナビア®V5 ベーストユニバーサル(0.1g / 4.6mL)×1本
パナビア®V5 トラインベーストユニバーサル(2.4g / 18mL)×1本
パナビア®V5 トゥースプライマー(2mL)×1本
クリアフィル® セラミック プライマー プラス(2mL)×1本
K エッチャント シリンジ(3mL)×1本

＜付属品＞
ミキシングチップ(含着目)×15個、ミキシングチップ(エンド用)×6個、ガイドチップ(エンド用)×5個、ニードルチップ(E)×20個、アプリケーションブラシ(フライングシルバー)×50本、ディスポ小筆ブラシ(黒)×50個、小筆ホルダー(黒)×1本、湿和皿(FPN)×1個

特別価格にてご提供！

歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材)

カタナ®クリーナー

■標準価格 4,490円 202430870

特別価格にてご提供！

モリタ友の会セミナー 締め切り間近!!

審美と補綴修復の基礎とトレンド ~審美補綴をスタートするために・アップデートするために~

開催日時

2023年10月29日(日)
10:00~17:00

お申込み期日 会場受講 / カード決済 10/28(木)
WEB受講 / カード決済 10/28(土)

開催会場

フリーゼプラザ ホール
〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 フリーゼタワー8階
TEL 06-6344-4888



会場受講の申し込みはこちら



WEB受講の申し込みはこちら

講師



六人部 慶彦 先生 脇 智典 先生 岩田 淳 先生



クラレニタケデンタル LINE公式アカウント

製造販売 クラレニタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市重水町3-33-18 〒564-8650 T 06-6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03-3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800-222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

株式会社 松本歯科商会


〒984-0047 仙台市若林区木ノ下2丁目1-20
TEL 022-293-3588 FAX 022-293-3594

クラレノリタケデンタル開発部に聞いてみた! 「カタナクリーナー」開発秘話



「クリーナー?」清掃材ってことですか?
補綴修復に必要なものなのでしょうか?

近年、審美意識も高まり、ジルコニアをはじめニケイ酸リチウムガラスセラミックス、レジンプロック等材料も多様化が進んでいる中、このような補綴装置類は、装着前に適合の確認やコンタクト・咬合の調整が行われますが、この際に生じる唾液汚染をはじめとする被着面の汚染は、レジンセメントの接着疎外因子となり、接着力を低下させることが懸念されています。

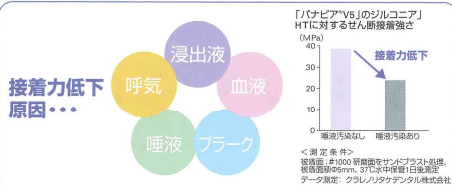


そこで!当社クラレノリタケデンタルオリジナルのリン酸エステル系モノマー「MDP®」と塩基性成分から形成される塩(MDP塩)の界面活性作用により汚染面を清掃し、接着材料の接着性を高める清掃材を開発したのです。



この(MDP塩)の界面活性作用とこすり塗りによる物理的作用により清掃し、併用される接着材料の接着力の向上が期待できます。

接着阻害物質を浮かせて流す!

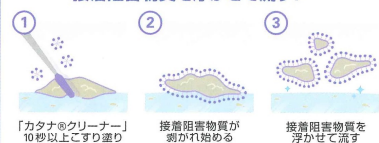

今の補綴修復のニーズにマッチした製品なのですね!

また、本製品は水を溶剤とした弱酸性の液組成物なので、**口腔内(支台歯)**にも使用することができます。ぜひ臨床の接着システムの性能を発揮するための重要なアイテムとしてあらゆる場面で役立ていただければ幸いです。

口腔内
使用OK!

呼び醒ませ **本来の接着力**




カタナ®クリーナー

その支台歯・補綴装置の汚れ 接着力低下の原因かも!!
臨床における様々な阻害因子によって、本来の接着性能に影響を及ぼす可能性があります。



「ノリタケカタナ®シルコニア」HTTに対する「パナビア®V5」のせん断接着強度(人工唾液汚染)
補綴装置の試適などによる血液や唾液による汚染で歯科用接着材の接着力は低下します

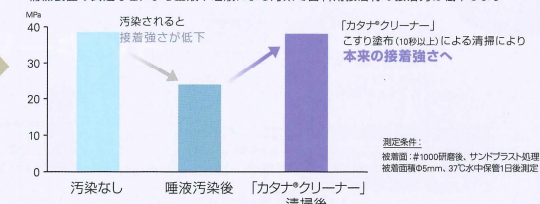


カタナ®クリーナーのポイント

1. MDP技術を応用した、高い洗浄効果
2. 弱酸性*だから、**口腔内外で使用可能** *約pH4.5
3. 水洗性良好で被着面に液剤が残りにくいため、**接着阻害を起こさない**

血液や唾液による汚染を清掃し、
併用する接着材料の接着性を向上


○「パナビア®V5」のせん断接着強度(人工唾液汚染)

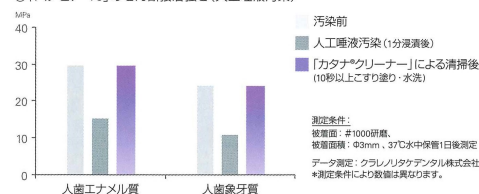

支台歯の
清掃にも
効果的!



カタナクリーナーで清掃後は... **パナビア®V5 接着強固**


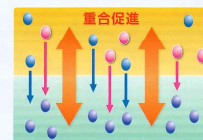


タッチキュアによる接着界面の封鎖

トゥースプライマーには新規の高活性重合促進剤を採用しており、トゥースプライマーを塗布した歯質とセメントペーストが接着界面で接触することにより、重合が促進されます(タッチキュア)。これにより、界面の封鎖が期待できると同時に、強固な接着により、歯質と補綴装置と一体化させることが可能です。

●酸化剤(化学重合触媒) ●新規重合促進剤(化学重合促進剤) ●還元剤(化学重合促進剤)

高い象牙質への接着力

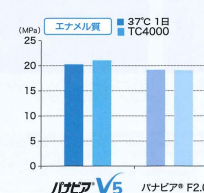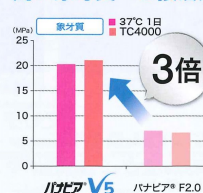

審美修復物が
キレイで
接着強固って
安心!!

