

クラレノリタケデンタルの 支台築造システムのご案内




東京科学大学(旧東京医科歯科大学)・徳山直志先生

販売名 クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE 一般名称 歯科用支台築造材料 医療機器認証番号 223AB8ZX00086000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
販売名 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2 一般名称 歯科用歯肉保護材料(歯科用セパレート用接着材料) 医療機器認証番号 305AB8ZX00012000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
販売名 クリアフィル® セラミックプライマー プラス 一般名称 歯科用セパレート用接着材料(歯科用歯肉保護材料) 医療機器認証番号 223AB8ZX00010500 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

歯科用支台築造材料 クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE 歯科用根管用ポスト成形品 クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ



より天然歯に近い色調を

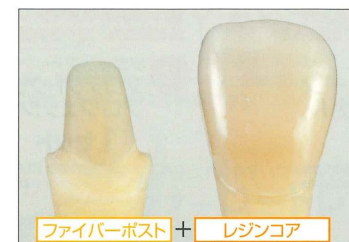


支台歯によるクラウン外観の比較
● クラウン : リタケ カタナ® ジルコニア (ITM)Ⅰ
● ファイバーポスト : クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ
● レジンコア : クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE (デンチン)
● 鍛造金属コア : 歯科用鍛造金銀パラジウム合金

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

良好な賦形性

当社独自のフィラー表面処理技術により、
ペーストが注ぎ易く垂れにくくなりました。

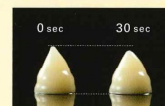

組み合わせ自由


症例に合わせて使いやすさを選択できます。



クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ

高耐久性

無機フィラー配合によるマトリックス部の強化によっ
て、耐久性向上が期待されます。

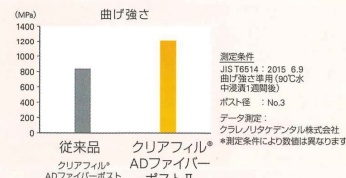

ポストの長さ22mm

試通時などにピンセットで把持しやすい長さです。
※従来品 18 mm → 22 mmへ延長




幅広いサイズ

下顎前歯に対応するNo.2(直径0.84 mm)から
No.6(1.64 mm)をラインナップ。症例に応じ
た選択可能です。
※形成用ドリルは、ピーンリーマーをご使用ください。



使用ステップ

① 根管形成 ② 根管へのボンド塗布 ③ ボンドの乾燥 ④ 余剰ボンドの除去 ⑤ 光照射 ⑥ ペーストの挿入 ⑦ 支台形成

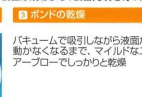

※1 クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ ※2 K エッチャント シンシジ ※3 クリアフィル®セラミックプライマー プラス
※4 照射時間は、電子波文字等と併用してください

写真提供: 歯科佐藤 横須崎 佐藤 洋平先生

販売名 クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE 一般名称 歯科用支台築造材料 医療機器認証番号 223AB8ZX00086000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
販売名 クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ 一般名称 歯科用根管用ポスト成形品 医療機器認証番号 305AB8ZX00012000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
販売名 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2 一般名称 歯科用歯肉保護材料(歯科用セパレート用接着材料) 医療機器認証番号 223AB8ZX00010500 医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)